


インフルエンザウイルスキット  
SARSコロナウイルス抗原キット

# プライマルスクリーン<sup>®</sup> SARS-CoV-2/Flu


マルチカラー

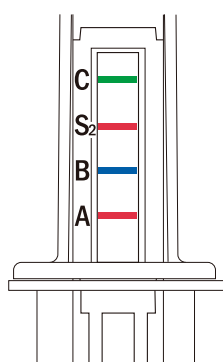

インフルエンザウイルス抗原  
SARS-CoV-2抗原  
**同時測定**



判定時間 **5分**

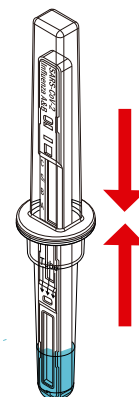

ワンステップ操作で滴下不要  
チューブキャップ装着で  
飛散、液漏れ防止

## 製品概要

- 測定原理：免疫クロマト法
- 判定時間：～5分
- 使用目的：鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のSARS-CoV-2抗原、A型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出(SARS-CoV-2感染又はインフルエンザウイルス感染の診断の補助)
- 貯蔵方法：室温(1℃～30℃)
- 有効期間：12ヵ月(使用期限は外箱に記載)

製造販売元

**ADTEC アドテック株式会社**

〒879-0453 大分県宇佐市大字上田1770番地の1  
企画開発部 0978-41-1000 (ダイレクトイン) FAX 0978-37-3360  
<https://www.adtec-inc.co.jp/>

## 操作方法

**鼻咽頭ぬぐい**  
滅菌綿棒を鼻腔孔から耳孔を結ぶ線にほぼ平行になるように鼻腔底に沿ってゆっくり挿入し、**鼻咽頭を数回擦過してぬぐい液を採取します。**

OR

**鼻腔ぬぐい**  
滅菌綿棒を鼻腔に沿って**2cm程度挿入し、鼻甲介付近でゆっくり5回程度回転させて擦過します。**数秒間静置してぬぐい液を採取します。

5回転

チューブの外側から綿球部分をつまんで揉むように、採取した検体をよく絞り出してください。最後にチューブをつまんでしごくように綿棒を引き抜いて、可能な限り多くの液を絞り出してください。

テストスティックを検体液入りチューブにまっすぐにゆっくりと挿入します。**チューブの底までテストスティックを差し込みます。**

付属のチューブキャップをしっかりとめ込み、チューブを密閉します。

**スティック挿入から5分間静置**

<b>インフルエンザA型陽性</b>	<p>判定部「A」に赤色のラインが出現</p>
<b>インフルエンザB型陽性</b>	<p>判定部「B」に青色のラインが出現</p>
<b>SARS-CoV-2陽性</b>	<p>判定部「S<sub>2</sub>」に赤色のラインが出現</p>
<b>陰性</b>	<p>判定部「C」に緑色のラインのみが出現</p>

5分間静置後、テストスティックの判定部分に出現するラインの有無を目視で観察し判定します。**ただし、5分より以前であっても判定部[C]に緑色のラインといずれかの陽性ラインが両方確認出来た時点で陽性と判定することができます。**

## 参考データ

(本品の添付文書より引用)

### 臨床検体を用いた相関性試験成績

		SARS-CoV-2				A型インフルエンザウイルス			B型インフルエンザウイルス		
		鼻咽頭ぬぐい		鼻腔ぬぐい		鼻咽頭ぬぐい			鼻咽頭ぬぐい		
		既承認品	リアルタイム RT-PCR	既承認品	リアルタイム RT-PCR	既承認品	分離培養法	リアルタイム RT-PCR	既承認品	分離培養法	リアルタイム RT-PCR
本品	陽性	47/47 (100%)	50/54 (92.6%)	45/45 (100%)	49/54 (90.7%)	76/76 (100%)	71/71 (100%)	76/77 (98.7%)	88/88 (100%)	89/90*5 (98.9%)	89/90 (98.9%)
	陰性	59/62*1 (95.2%)	55/55 (100%)	60/64*2 (93.8%)	55/55 (100%)	51/51 (100%)	50/55*3 (90.9%)	50/50 (100%)	51/55*4 (92.7%)	50/50 (100%)	50/50 (100%)
	全体	106/109 (97.2%)	105/109 (96.3%)	105/109 (96.3%)	104/109 (95.4%)	127/127 (100%)	121/126 (96.0%)	126/127 (99.2%)	139/143 (97.2%)	139/140 (99.3%)	139/140 (99.3%)

\*1 リアルタイムRT-PCRの結果3例すべてSARS-CoV-2陽性となりました。\*3 PCRの結果5例すべてA型陽性となりました。  
\*2 リアルタイムRT-PCRの結果4例すべてSARS-CoV-2陽性となりました。

\*4 PCRの結果4例すべてB型陽性となりました。  
\*5 PCRの結果1例すべてB型陽性となりました。

### 重要な基本的注意

- 本品の判定が陰性であっても、SARS-CoV-2またはインフルエンザの感染を否定するものではありません。
- 検査に用いる検体については、厚生労働省より公表されている「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」を参照してください。
- 診断は厚生労働省より発表されている医療機関・検査機関向けの最新情報を参照し、本製品の検査結果のみで行わず、臨床症状も含め、総合的に判断してください。
- 鼻腔ぬぐい液を検体とした場合に、鼻咽頭ぬぐい液に比べ検出感度が低い傾向が認められるため、検体の採取に際して留意してください。
- 検体採取及び取扱いについて、必要なバイオハザード対策を講じてください。

### お問い合わせ先